


2019-2020

# VREZ

Filtration & Separation Solutions

## Stream filtration system

Focus on  
laboratory sample filtration solutions

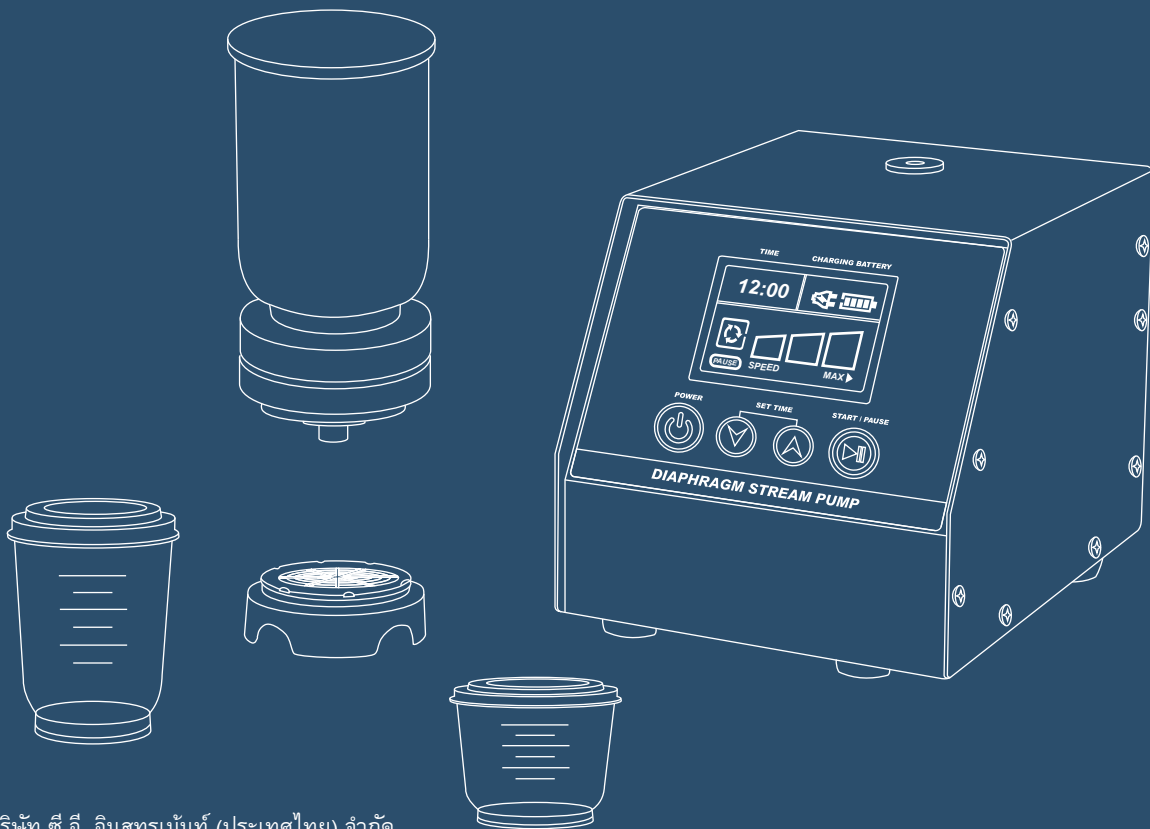

บริษัท ซี.อี. อินสตรูमेंท์ (ประเทศไทย) จำกัด  
68/876 หมู่ 8 ถนนรัตนวิเบศร์ ต.บางกระสอ  
อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000

โทรศัพท์ 02 9658971-3 โทรสาร 02 9658974

Email : sales@cethailand.com www.cethailand.com

TIANJIN SCICHRO TECHNOLOGIES CO., LTD.



# STREAM FILTRATION SYSTEM

Enjoy the Laboratory

# ALL in ONE

**WHAT IS STREAM FILTRATION SYSTEM ?**

**DO YOU NEED IT?**



Stainless steel  
150ml filter holder  
clamp-free



Stainless steel  
300ml filter holder  
clamp-free



Boro.glass  
300ml filter holder  
with clamp

Meet various laboratory need



PP funnel, sterile  
250ml filter holder



PP funnel, sterile  
250ml filter holder  
with membrane filter



Inkfish suction kits



Filtration manifold



## FEATURE

### Save Space, Save time

No need of suction flask and waste bottle saving much bench, No need of taking time to empty waste bottle.

### Easy Operation

Simply put on membrane on filter holder and touch control panel to start filtration easily, support adjust control rate. LCD display screen can easy identify.

### Compatible to different size of holder

Manifold Branch Ports are available to fit 150ml, 300ml, 250ml, 300ml holders, suction kits, and filtration manifold.

### Safety

No worry about waste liquid being sucked into pump


### Build-in rechargeable battery

Stream pump build in 5200mA large volume battery, available for outdoor sampling. No longer limited by wires.



## SPECIFICATION

Item	WV300
Part.No.	579300-10
Drive type	Diaphragm
Flow rate control	Three-speed gear
Max. flow rate(water)	1500ml /min
Display screen	LED
Key Control	Touch panel
Voltage	12.6V
Built-in battery capacity	5200mA
Charger	12.6V/3A
Outlet	ø 5mm/ c 8mm
Dimension(mm)	200X135X135mm
Weight(Kg)	1.8Kg
House material	SUS304
Panel	PMMA

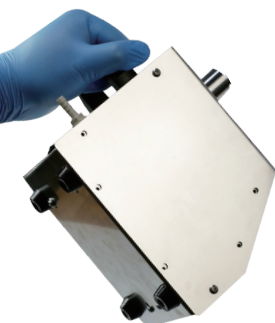

**Battery  
usage**



**Plug in  
usage**

## PRODUCT INFORMATION

### Fit stainless steel funnel holder



VREZ-F8  
Stainless steel  
150ml filter holder  
clamp-free

+

WV300  
Stream pump



VREZ-F7  
Stainless steel  
150ml filter holder  
clamp-free

+

WV300  
Stream pump






**Fit Boro.glass funnel holder**



VREZ-F6  
Boro.glass  
300ml filter holder  
with clamp  
  
+  
  
WV300  
Stream pump

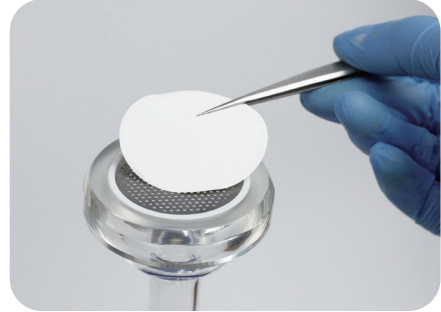

**Fit sterile PP funnel holder**




PP funnel, sterile  
250ml filter holder  
  
+  
  
WV300  
Stream pump



PP funnel, sterile  
250ml filter holder  
with membrane filter  
  
+  
  
WV300  
Stream pump



Membrane filter  
can be cultivated directly

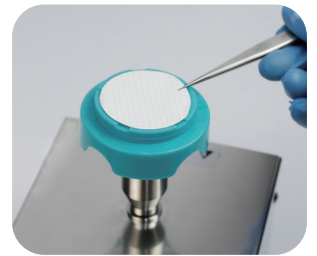

**Fit Inkfish suction kits**



Inkfish SC10  
suction kits  
  
+  
  
WV300  
Stream pump

**Fit filtration manifold**



Filtration manifold  
VREZ-3CF  
  
+  
  
WV300  
Stream pump